



**Hämatologisches Speziallabor**

Tel.: 0391 67 13108, Fax: 0391 67 13240

Laborleiter: PD Dr. med. E. Schalk

Homepage: <http://www.khae.ovgu.de/haemalabor.html>

Prof. Dr. med. Thomas Fischer  
Direktor



Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.  
Leipziger Str. 44, Haus 39/40  
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13266  
Telefax: +49 391 67-13267

18.03.2021

**Labormitteilung des Hämatologischen Speziallabors  
Nr. 02/2021**

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Sie auf die Verpackungsvorschriften der Deutschen Post AG hinweisen, die den Versand von Probenmaterial an unser Speziallabor betreffen, und bitten um ihre Einhaltung.

Grundlage sind die Versandvorschriften, die auch den Luftverkehrsvorschriften der ICAO-TI (International Civil Aviation Organization – Technical Instructions) bzw. IATA-DGR (International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations) entsprechen.

**1. Ansteckungsgefährliche Stoffe und Gegenstände der Kategorie B (UN-Nr. 3373, Biologischer Stoff, Kategorie B)**

- nur als Maxibrief
- keine Kühlung durch verflüssigten Stickstoff oder Trockeneis (Kohlendioxid, fest) erlaubt
- in bauartgeprüfter Verpackung entsprechend der Verpackungsanweisung PI 650 der IATA-DGR (Dreifachverpackung mit kistenförmiger Außenverpackung)
- deutliche und dauerhafte Kennzeichnung der Außenverpackung mit:
  - „Biologischer Stoff, Kategorie B“ und „Biological Substance, Category B“
  - UN-Nr. 3373 in Raute (Seitenlänge mindestens 50 x 50 mm)
- Telefonnummer einer verantwortlichen Person
- Kennzeichnung für die Bauartprüfung der Verpackung

## 2. Freigestellte Patientenproben

- als Großbrief, Maxibrief oder Päckchen
- Verpackung gemäß 3.6.2.2.3.6 IATA-DGR (Dreifachverpackung, Außenverpackung kistenförmig oder Versandhülle, „PI 650 light“)
- deutliche und dauerhafte Kennzeichnung der Außenverpackung mit:
  - „Freigestellte medizinische Probe“ und „Exempt human specimen“

## 3. Andere gemäß 3.6.2.2.3 IATA-DGR freigestellte Stoffe und Gegenstände (z.B. nicht ansteckungsgefährliche Stoffe, neutralisiertes/deaktiviertes Untersuchungsgut, Gewebe und Organe für Transplantationen usw.)

- als Großbrief, Maxibrief oder Päckchen
- Außenverpackung kistenförmig oder Versandhülle
- Dreifachverpackung (Ausnahme: Vorsorgeuntersuchungen für im Stuhl enthaltenes Blut und desinfizierte Objektträger für die Mikrobiologie - für diese wird eine zusammengesetzte Verpackung gefordert)

## 4. a) Biologische Stoffe/Produkte, die der UN-Nr. 3373 zuzuordnen sind

- wie UN 3373 Siehe Nr. 1

## 4. b) Biologische Stoffe/Produkte, die gemäß 3.6.2.3. I (a) IATA-DGR freigestellt sind

- als Großbrief, Maxibrief, Päckchen, Infopost oder Warensendung
- Außenverpackung kistenförmig oder Versandhülle
- zusammengesetzte Verpackung

Alle Sendungen müssen mit Name und Anschrift des Absenders und Empfängers gekennzeichnet sein sowie den vollständig ausgefüllten Anforderungsschein enthalten.


Mit freundlichen Grüßen



PD Dr. med. E. Schalk  
Laborleiter



H. Lühr  
Ltd. MTLA

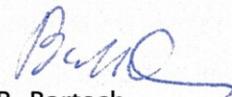

R. Bartsch  
QMB